


bloomea®

PARIS



NeoCare

SKIN EXPERT

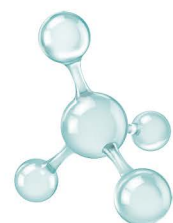

EN ALS JOUW EXPERTISE EN DE NEOCARE ENERGIE ÉÉN EN DEZELFDE WAREN...?

Wij hebben het antwoord : dankzij de Tecar Esthetiek **Bloomea** zorgt voor een revolutie in de hoogfrequente stroom.

Deze nieuwste generatie technologie is het resultaat van een Franse co-branding tussen de leider in hoogfrequentie therapeutische stromingen en **Bloomea**, een expert in huidverzorging.

Neocare voldoet aan de verwachtingen van een zeer veeleisend mannelijk en vrouwelijk cliënteel door efficiëntie en comfort te combineren in dezelfde behandeling.

UW EXPERTISE



STIMULEERT DE **NATUURLIJKE** HULPBRONNEN VAN UW LICHAAM

Neocare maakt gebruik van hoogfrequente stromen tussen 300 en 1000 KHz, waardoor er op 2 soorten cellen gewerkt kan worden: **fibroblasten**, verantwoordelijk voor de jeugdigheid en **adipocyten**, verantwoordelijk voor het slanke silhouet.



ONZE
ENERGIE

①

WERKT OP DE
HUIDVEROUDERING

②

VERBETERT HET
SILHOUET EN
VERWIJDER **CELLULITIS**




BIOLIGISCHE WERKING REGENEREREN

Het is de actie van het heropbouwen van je weefsels, zoals bijvoorbeeld je huid. **BIONE** zal dus de intra- en extracellulaire uitwisselingen van de huidlagen weer op gang brengen, waardoor de huid steviger en elastischer wordt. Uw fijne rimpels vervagen en uw huid krijgt weer een natuurlijke uitstraling.

THERMISCHE WERKING DYNAMISEREN

De complementaire werking van **THERMONE** kan de actieve bestanddelen (voedingsstof, zuurstof) die naar het behandelingsgebied gericht zijn, diepgaand versterken. De metabolische activiteit van de zone zal een snelle consumptie van de actieve bestanddelen mogelijk maken, evenals hun evacuatie.

Maar dat is nog niet alles, de mogelijkheid om de bloed- en lymfecirculatie weer op gang te brengen zal het behandelde gebied helpen om de voorraad te ontlasten.

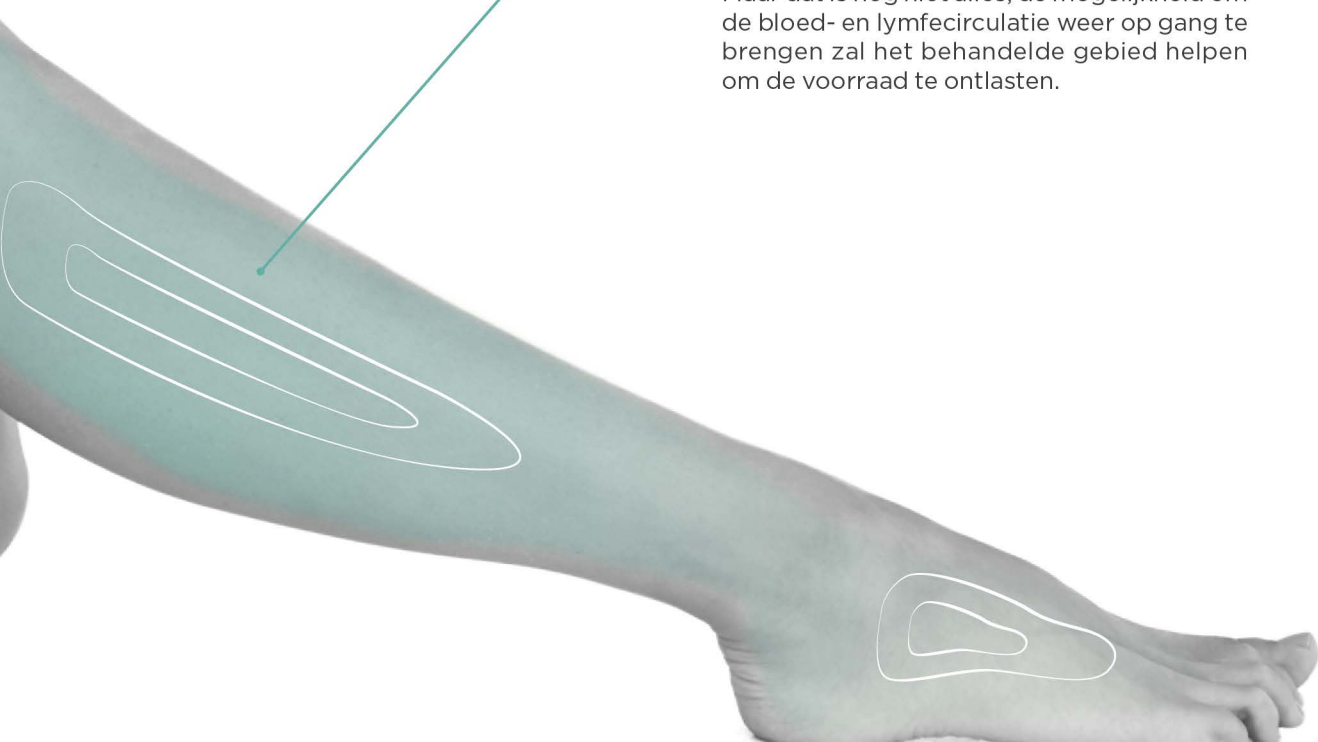

NEO : BIO VERSNELLER VOOR HET AFSLANKEN



LICHAAM

- REDENSIFICEREN VAN HUID
- VERSTEVIGEN VAN DE ARMEN
- VERMINDEREN CELLULITIS
- ERBETEREN LICHAAMSCONTOUREN
- HET ELIMINEREN VAN VOCHTOPHOPINGEN
- BEHANDELEN VAN DE 3 SOORTEN CELLULITIS





VEZELACHTIGE CELLULITIS

Lange tijd aanwezig, zeer moeilijk te ontkoppelen. Hard en pijnlijk om aan te raken.



VET CELLULITIS

Vaak gerelateerd aan overgewicht. Zacht, dik en pijnloos. Komt voor op de buik, dijën en billen.



WATERIGE CELLULITIS

Gelinkt aan vochtophoping door slechte veneuze en lymfecirculatie.



NEO : BIO VERSNELLER VAN DE JEUGDIGHEID



GEZICHT EN HALS

- **DE HUIDTEXTUUR** VERFIJNEN
- **HET DRAINEREN** EN HERSTELLEN VAN DE GLANS VAN DE TEINT
- **HET ELIMINEREN** VAN VOCHTRETENTIE (wallen onder de ogen)
- **RIMPELS** EN IMPERFECTIES VERVAGEN (acnelittekens)
- **LIFTEN** VAN DE GEZICHTSCONTOUREN
- **VERMINDEREN** DUBBELE KIN
- **GLAD** MAKEN VAN HET DECOLLETE
- **BEHANDELEN** VAN DE 3 TEKENE VAN VEROUDERING



SKELETVORMING

Ingevallen wangen / Diepe rimpels op het voorhoofd / Duidelijk gemarkeerde oogcontouren / Meer uitgesproken oogkassen / Fijne lijntjes rond de lipcontouren



VETOPHOPING

Dubbele kin / Rondingen ter hoogte van het gezicht en de wangen / Gewichtstoename



VERSLAPPING

Afhangende oogleden / Ingezakte jeukbeenderen / Nazolabiale groeven / Wangen / Verslapping van de gezichtscontouren



HET PRINCIPE VAN DE FREQUENTIE

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de frequentieband tussen 300 en 1200 khz een toename van intra- en extra-cellulaire uitwisselingen en een diathermisch effect op levende weefsels veroorzaakt.


- **Monopolaire stroom :**

De stroom beweegt zich tussen 2 elektroden. Een mobiele elektrode (het handstuk) die door de behandelaar wordt vastgehouden en een vaste elektrode die over het algemeen onder de rug wordt geplaatst.

- **Multipolaire stroom :**

De stroom beweegt tussen de kleine elektroden op het handstuk.

Uw **NeoCare** is uitgerust met 4 soorten elektroden die behandelingen op verschillende dieptes mogelijk maken :

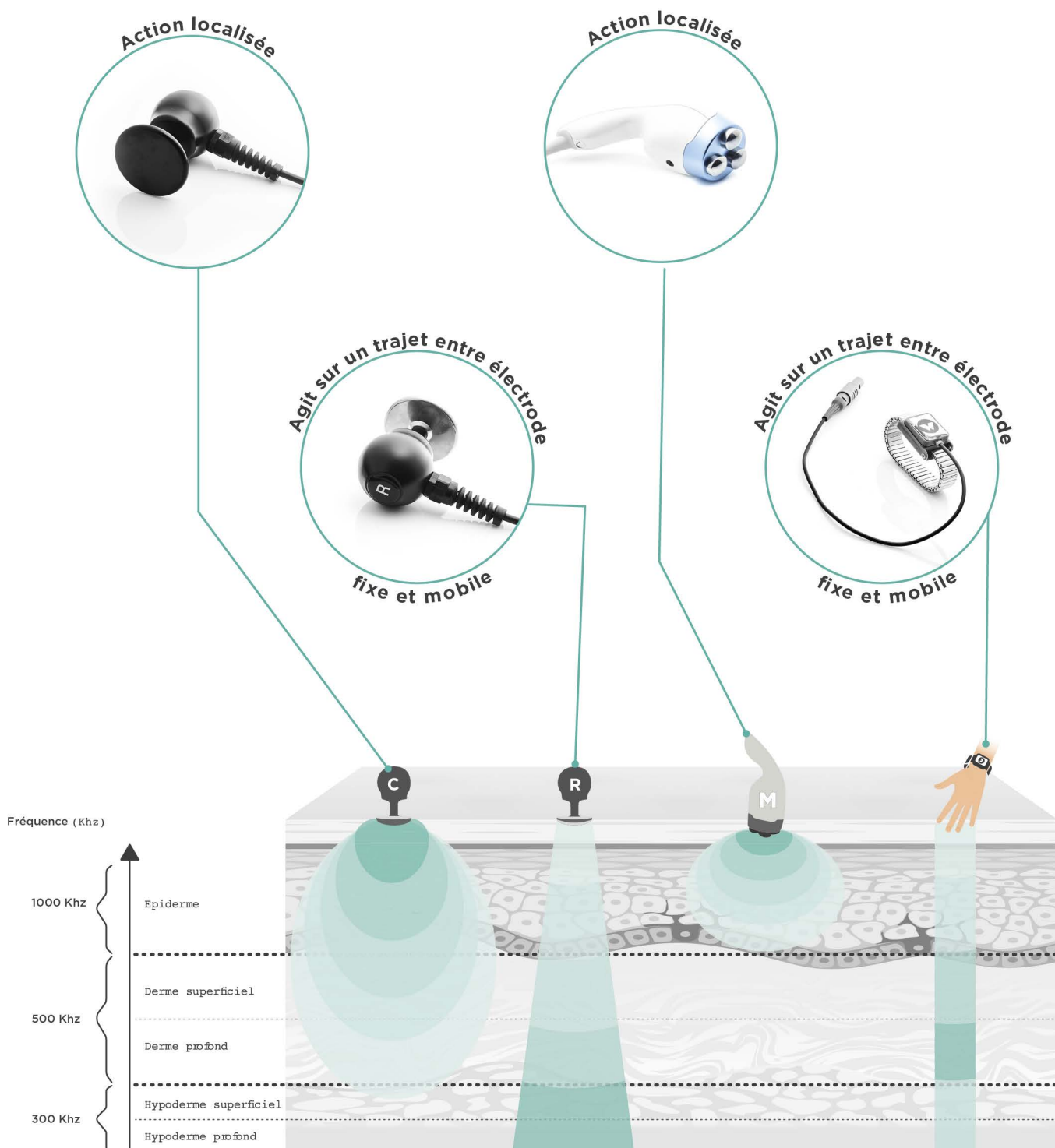

**NEOCARE INNOVATIE :
UW MANUELE KNOWHOW
TEN DIENSTE VAN DE TECHNOLOGIE.**

Dankzij een systeem van armbanden verzoent neocare de manuele praktijk met de modernste technologie om de neo-energie te kunnen verspreiden naar de diepe lederhuid via een niet-invasieve stroom die 100% natuurlijk is voor het menselijk lichaam.

De meest kwetsbare gebieden kunnen worden behandeld en de huid kan worden gevormd wanneer het u uitkomt om de huidverslapping en het silhouet te behandelen.



NUTTIGE FUNCTIES

Om cellulaire gewenning tegen te gaan, gebruikt het neocare-apparaat 3 functies voor een optimaal en langdurig resultaat :



DYNAMIC

automatisch scannen van de frequenties tussen de oppervlakkige en diepe lagen van het stofweefsel. gelijktijdige meerlaagse spanningsvrijgave en vasculaire rekrutering



CET



LOW PULSE

Fijne handeling op ontstoken zones / Versnelling van drainagetechnieken op lymfeklieren / Het optimaliseren van de terugkeer naar de rust.



DEEP CET



SUPER PULSE

Gepulseerde intensiteitspiek die het mogelijk maakt om in hyperthermie te werken en tegelijkertijd het ongemak te beperken dat verband houdt met de sterke hitte die wordt gevoeld. Voornamelijk gebruikt voor kroezend, littekenweefsel, dwingt het de gebieden met weinig vascularisatie om te revasculariseren en de collageensynthese te bevorderen.



RET



BRACELETS

SNEL

Zichtbare resultaten vanaf de eerste behandeling.

DUURZAAM

Het gewenste effect is duurzaam mits 1 onderhoudsbeurt per maand.

COMFORTABEL

Een behandeling niet-invasief en volledig pijnloos.

SOINS BEAUTY

WELLNESS

NeoCare

Applications additionnelles

CICATRICES & VERGETURES

DETOX

DRAINAGE



LE PLUS DE NEOCARE

L'énergie NeoCare avec le poids en moins

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence	300 KHz, 500 KHz & 1 MHz
Fonction	DYNAMIC - LOW PULSE - SUPER PULSE
Poids	19kg (appareil + chariot)
Dimensions	105x35x48 cm

ACCESSOIRES

NeoCare 1.0	MOBILE CET : 3 électrodes de tailles différentes pour action focus ou radiale MOBILE RET : 3 électrodes de tailles différentes pour les petites et les grandes surfaces FIXE : Plaque de retour et 10 plaques adhésives FLEX MyNeo : Bracelet résistif (RET)
NeoCare 4.0	MIX3 (Corps) - MIX3 (Visage)
NeoCare 5.0	2 plaques adhésives RET, 2 bracelets RET. Câble double résistif (RET)

Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.
Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO14385 - KIWA 1984.



*Le temps à
contre-courant*

**Aesthetic Modeline
Bloomea Paris**
5 rue Poirier de Narçay
75014 PARIS

T. +33 (0) 9 86 34 45 73
contact@bloomea.fr
www.bloomea.fr

NeoCare

SKIN EXPERT

